

# Weighted Strap Accessory Guide

**AccelStim™**  
Bone Healing Therapy



Weighted Strap





Transducer Holder



Transducer



1. Place the transducer holder through the bottom opening of the weighted strap and open the blue cover to the transducer by rotating it.

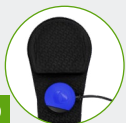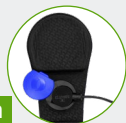

2. Insert the transducer into the transducer holder so the serial number is visible and facing upward. (As shown in picture 2a.) Close the blue cover by rotating it and proceed with treatment. (As shown in picture 2b.)



3. Apply the gel to the side of the transducer with no writing to form a 1-2mm thick layer. For more information please see the AccelStim device manual.

4. Place the assembled weighted strap over the area that needs to be treated. The transducer holder should align with the area of treatment. The transducer holder while attached to the weighted strap can be rotated as needed to provide maximum comfort.

5. At the end of the 20-minute treatment, remove the weighted strap assembly and clean the remaining gel from the weighted strap assembly. It is recommended to disassemble the weighted strap assembly to ensure the cleaning of remaining gel from each component. Refer to the Care and Cleaning instructions in the AccelStim device manual.

**Orthofix.com**  
**BoneGrowthTherapy.com**  
800.535.4492

PN 20127338 Rev AC 2025-08-18  
© Orthofix US LLC 08/2025

**Warning:** If any parts of the AccelStim device or accessories are damaged, do not use the AccelStim device. Please contact Patient Care at 800.535.4492.

**Precaution:** Patients and caretakers should assess for adverse reactions on the skin where the device has contact, such as redness (erythema), swelling (edema), irritation, sensitization (delayed Type IV hypersensitivity), allergy, immune response, or other reactions. Stop use if any reactions are detected.

Orthofix, its logo, and AccelStim are trademarks or registered trademarks of Orthofix Medical Inc. and/or its affiliate companies.



# Guía de accesorios de la correa con peso

# AccelStim™

Terapia para consolidación ósea



Correa con peso



Soporte del transductor



Transductor



1. Coloque el soporte del transductor a través de la abertura inferior de la correa con peso y gire la tapa azul del transductor para abrirla.

2. Inserte el transductor dentro del soporte del transductor de modo que el número de serie sea visible y quede hacia arriba (como se muestra en la imagen 2a). Gire la tapa azul para cerrarla y continúe con el tratamiento (como se muestra en la imagen 2b).

3. Aplique el gel al costado del transductor sin escribir para formar una capa de 1-2 mm de espesor. Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo AccelStim.

4. Coloque la correa con peso ensamblada sobre el área que necesita tratamiento. El soporte del transductor debe alinearse con el área de tratamiento. Mientras el soporte del transductor está conectado a la correa con peso se puede girar según sea necesario para brindar la máxima comodidad.

5. Al final del tratamiento de 20 minutos, retire el conjunto de la correa con peso y limpie el gel restante en él. Se recomienda desarmar el conjunto de la correa con peso para asegurar que se haya limpiado el gel restante de cada componente. Consulte las instrucciones de cuidado y limpieza en el manual del dispositivo AccelStim.

Orthofix.com  
BoneGrowthTherapy.com  
800.535.4492

PN 20127338 Rev. Rev AC 2025-08-18  
© Orthofix US LLC 08/2025

**Advertencia:** No use el dispositivo AccelStim si alguna parte del dispositivo AccelStim o los accesorios están dañados. Comuníquese con Atención al paciente al 800.535.4492.

**Precaución:** Los pacientes y cuidadores deben evaluar reacciones adversas en la piel donde el dispositivo tenga contacto, como enrojecimiento (eritema), hinchazón (edema), irritación, sensibilización (hipersensibilidad de tipo IV tardía), alergia, respuesta inmunitaria u otras reacciones. Suspnda el uso si detecta alguna reacción.

Orthofix, su logotipo y AccelStim son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Orthofix Medical Inc. o sus compañías afiliadas.

